

とっても柔らかいクッション 新登場

長時間 車椅子でお過ごしの皆様

介護認定ご高齢者専用の
むきゆうクッション



動画URLは
こちらです



絶妙の体圧分散効果あり


介護保険適用品

TAISコード02122-000003

ご導入いただいた病院・介護施設様で、
高い評価をいただいています

むきゅうクッションの有効性を画像で

むきゅうクッション座面の体圧分散状況

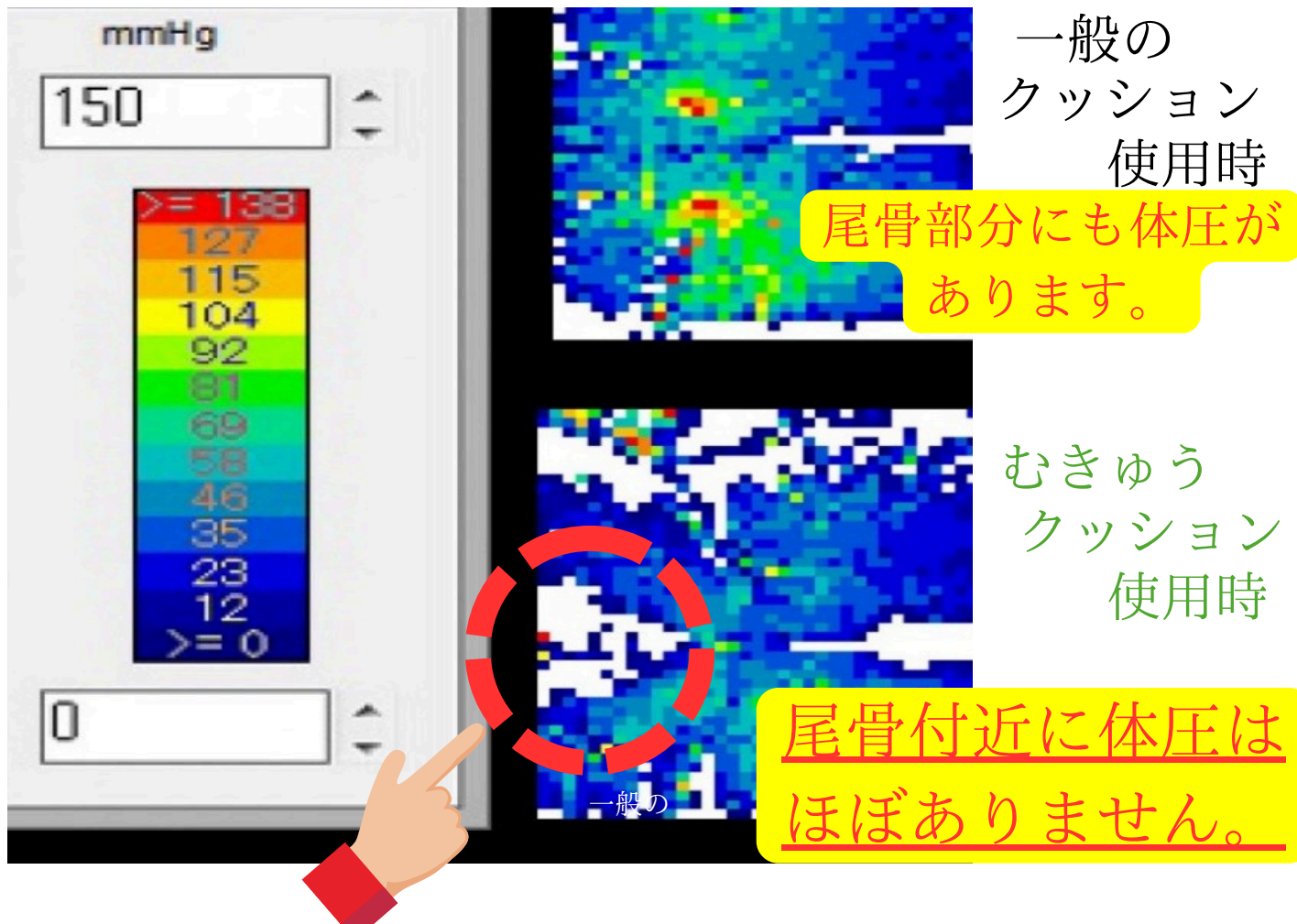

全体に黄色や赤色がほぼありません。

むきゅうクッション使用時は、全体がほぼ50mmhg（血圧計の値）以下になっていて、安全性が高いクッションの証明です。

この低圧が車椅子や椅子使用時
を快適な時間にして、生活の質
が大幅に向上します。

むきゅうクッションの特長やご使用方法

- 車椅子は、座面と背面でご利用者を支えています。
その構造に合わせた一体型クッションです。

時々、車椅子の角度を変えることで随分、
楽になり、ご気分も変わります。

- 座面前部が肉厚になっているため、前滑り（仙骨座り）の方々にもお勧めいたします。
※座面と底面の一部に滑り止め生地使用
- 縦方向の中央部に溝があります。
その部分の除圧に特に有効です。
また、湿潤の軽減につながります。
- 一般のラテックスより更に柔らかい素材です。
やさしくご使用者の体圧を受けます。
しかし、底付きしにくい厚さです。
- 防水カバー使用のため、失禁対策になります。
- 汚染時はカバーを清拭してください。
次亜塩素酸ソーダの希釈液やアルコール消毒が可能です。
臭いのある汚染時はカバー・本体とも
手洗い洗浄・中脱水・陰干しをしてください。
天日干しは劣化を早め、不適です。
- 本体は天然由来の抗菌力があります。
サイズ（約）：80×40×10cm（前方）6cm（後方）
マテリアル（本体）：100%バージンラテックス
カバー：耐久撥水透湿ポリウレタンラミネート加工
ポリエステル100%